

Uputstvo za upotrebu

HEMODROPS® *plus*, kapi za vlaženje oka
10 mL

Pažljivo pročitajte i sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

OPIS:

HEMODROPS® *plus*, kapi za vlaženje oka su sterilan rastvor koji sadrži polietilenglikol 400, propilenglikol, hidroksipropil guar HP 105, bornu kiselinu, cink hlorid, kalcijum hlorid dihidrat, magnezijum hlorid heksahidrat, kalijum hlorid, natrijum hlorid, polidronium hlorid i vodu za injekcije.

UPOTREBA (Indikacije)

HEMODROPS® *plus* se koristi u terapiji suvog oka za privremeno olakšanje od peckanja i iritacije izazvanih suvoćom oka.

HEMODROPS® *plus* ne treba koristiti duže od 30 dana uzastopno.

KONTRAINDIKACIJE

(Zašto da ne koristite ove kapi):


Osobe alergične na bilo koji sastojak
HEMODROPS® *plus* ne treba da koriste ovo sredstvo.

UPUTSTVO

HEMODROPS® *plus* se može koristiti prema potrebi tokom celog dana. Može se koristiti kao terapija suvog oka nastalog usled nošenja kontaktnih sočiva tako što se kapi ukapaju pre stavljanja i nakon skidanja kontaktnih sočiva.

Način primene:

- pre primene kapi potrebno je da operete ruke
- zabacite glavu unazad i povucite prstom donji kapak, kako biste napravili „džep“ (odnosno prostor za ukapavanje) između kapka i oka (slika 1)
- okrenite bočicu, držeći je između palca i kažiprsta, pogledajte na gore i ukapajte 1-2 kapi u oko i trepnite (slika 2). Prilikom primene kapi, pazite da ne dodirnete oko ili očni kapak vrhom bočice.
- ponovite prethodno navedeni postupak za primenu kapi i u drugo oko
- ponovo operite ruke.

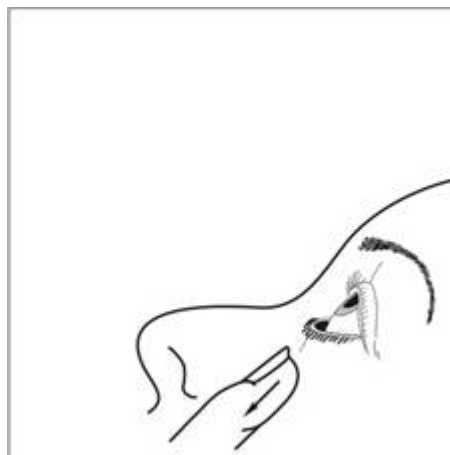

Slika 1



Slika 2

UPOZORENJA:

Da biste pravilno koristili ovaj proizvod neophodno je da pratite uputstva Vašeg lekara kao i sva priložena uputstva. Ukoliko osetite dugotrajnu nelagodnost u očima, pojačano suzenje, promene u kvalitetu vida ili crvenilo oka, potražite savet od Vašeg lekara, pošto problem može postati ozbiljniji.

Kod dece mlađe od 2 godine maksimalno se može primeniti 6 kapi tokom 24h.
Kod dece starije od 2 godine i odraslih osoba maksimalno se mogu primeniti 32 kapi tokom 24h.



MERE OPREZA:

- Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno pre nego što ste ga Vi otvorili. 
- Da biste izbegli kontaminaciju, nikada ne dodirujte vrhom bočice bilo kakvu površinu.
- Pre i posle primene HEMODROPS® *plus*, kapi za vlaženje oka, potrebno

je da operete ruke.

- HEMODROPS® *plus*, kapi za vlaženje oka, su namenjene samo za spoljašnju upotrebu.
- Zatvorite posle upotrebe.
- Čuvati na temperaturi do 25°C. 
- Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu kada se ne koristi.
- Upotrebiti pre isteka roka upotrebe koji je označen na proizvodu. 
- Nakon prvog otvaranja iskoristiti rastvor u roku od 6 meseci. Ne koristiti duže od 30 dana uzastopno.
- Držati van domašaja dece.
- Svu neiskorišćenu količinu ovog proizvoda ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.

PAKOVANJE:

HEMODROPS® *plus*, kapi za vlaženje oka pakovane su u neprovidnu plastičnu bočicu od 10 mL sa kapaljkom i zatvaračem.

STERILE	A
---------	---



Proizvođač:
Hemofarm AD, Beogradski put bb, 26300 Vršac
Republika Srbija

EC	REP
----	-----

 Salus cons Kft. Bécsi krt. 23, 6722 Szeged, Hungary

Broj rešenja o registraciji: 515-02-03173-19-003 od 28.10.2019.

Datum poslednje revizije teksta: Oktobar, 2019.